



筋肉の張りがある部分に  
ローラーを押し当てて転がす

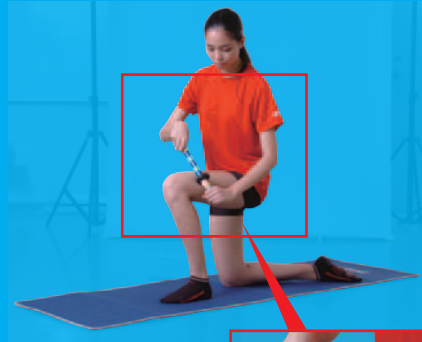

手軽に自分でマッサージー！

CARE STICK

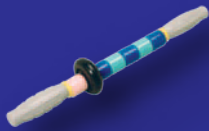

運動後のクールダウンに

ショートタイプ

エクササイズ 方法を  
動画でチェック 



NISHI

株式会社 ニシ・スポーツ  
<https://www.nishi.com/>

# 取扱説明書

品番：NKS8050C ケアスティックショート（ホイール付き）

## はじめに

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 使用方法

本品は自分でマッサージするための器具です。  
スティックを筋繊維に沿って転がすことで、マッサージを行います。  
コンパクトな形状のため持ち運びに便利です。

## 製品仕様

サイズ：(W) 約 400mm


重量：約 260g

材質：(心棒) POM、(グリップ) PVC

(ローラー) ナイロン、(ホイール) PU

台湾製

■磁石 約 0.2 テスラ (約 2000 ガウス)

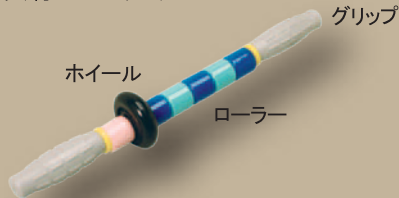

## 注意事項

- 本品は自分でマッサージするための器具です。その目的以外に使用しないでください。
  - 本品に亀裂・裂け目などの破損がないか、ご使用前に毎回点検してください。
  - もし異常があった場合は、使用しないでください。
  - 使用中に異常な痛みなどを感じたときはただちに使用を中止してください。
  - 高温・多湿・直射日光・ホコリを避け、雨風の当たらない場所に保管してください。
  - 本品を屋外に放置しますと、劣化などの原因となります。
  - 火気のある場所・ストーブや暖房器具の近くでは使用・保管しないでください。
  - 本品に付着した砂・ホコリ・水分などは必ず取り除いてください。
  - お手入れにはやわらかい布などを使用し、有機溶剤・アルカリ性洗剤・漂白剤・ブラシ・研磨用スポンジなどは使用しないでください。
  - 本品には、2000ステラの磁石が使用されています。ペース メーカーなど体内型電子医療機器を装着された人へは使用しないでください医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。
  - 体調によっては、お肌にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異状を感じられる場合があります。その場合は、すぐに使用を中止し専門医に相談してください。
  - お子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 本品の分解、改造は決して行わないでください。
- ※本品の廃棄に関しては、地域で定める条例にしたがってください。  
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

本品に関する お問い合わせ先	お客様相談室 TEL:03-6369-9024
受付時間	9:00~12:00/13:00~17:00 (土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

**NISHI** 株式会社 ニシ・スポーツ

<https://www.nishi.com/>

〒136-0075 東京都江東区新砂3-1-18